


FACIALIGHT

A MAGYAR FÉNYTERÁPIA

TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ · 2026

Fényterápiás *Matrac*

Klinikai szintű vörös és infravörös fényterápia.
Kötöttségek és kompromisszumok nélkül.

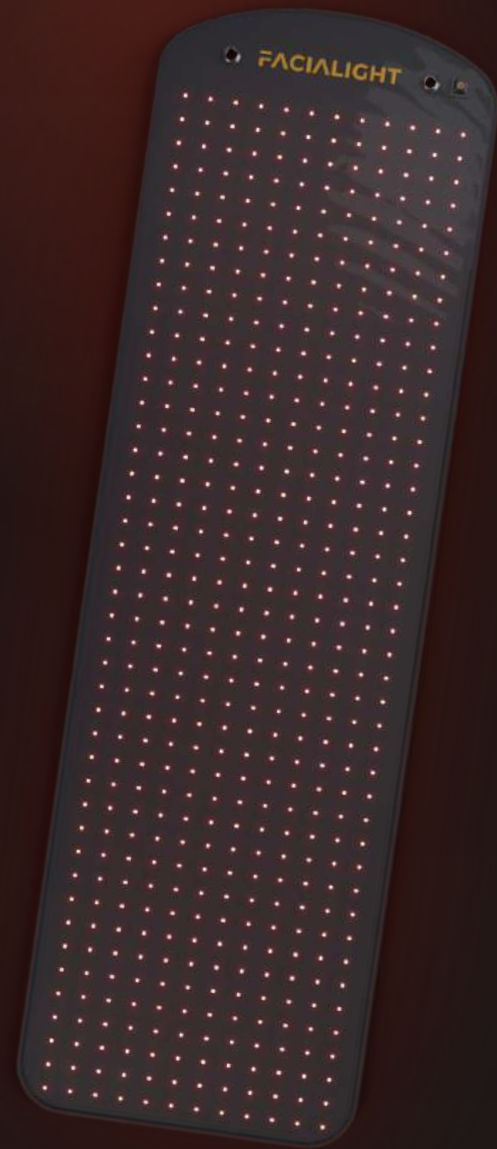

Tartalom

FACIALIGHT / 2026

01	Termékleírás és működés	03
02	Ajánlott alkalmazás	04
03	Hatások és előnyök	05
04	Használati útmutató	06
05	Tárolás és tisztítás	07
06	Műszaki specifikációk	08



Aktív fényterápia, *ami regenerál.*



A **Facialight Matrac™** vörös (660 nm) és közeli infravörös (850 nm) hullámhosszúságú fényt bocsát ki, amelyek klinikailag igazolt hatékonysággal serkentik a sejtek energiatermelését, a kollagénszintézist és a szövetek regenerációját. Nem hőkezelés, hanem maga a fény a „hatóanyag”.

HOGYAN MŰKÖDIK A STIMULÁCIÓ?

A vörös és infravörös fény képes átjutni a bőrön, egészen az izomszövetekig. A sejtek mitokondriumai elnyelik a fényt és a kapott energiacsomag révén fokozzák az ATP-termelést. Ezáltal fokozódik a sejtek megújulása, csökken a gyulladások mértéke és a mélyszövetek regenerációja is beindul.

01 • 660 NM

Vörös fény

Bőr felszíni rétegeiben hatékony. Kollagéntermelés, rugalmasság növelés, pigmentáció csökkentés.

02 • 850 NM

Közeli infravörös fény

Mélyebb szövetekben hatékony. Sejszintű regeneráció, izomláz és ízületi fájdalom enyhítése.

03 • ATP

Energiatermelés

A sejtek hajtóanyaga. Közvetlenül befolyásolja a regenerációt és a gyulladt területek felépülési idejét.

02

Kinek ajánlott?

Azoknak akiknek fontos a regeneráció.
Egyéni felhasználóknak, sportolóknak,
wellness és fitness központoknak.



Kinek való a Facialight?

A LED fényterápia nem egy szűk réteg kiváltsága. Az alábbiakban összefoglaltuk, kik profitálnak a legtöbbet a rendszeres használatból.

01

Aktív emberek, sportolók

Edzés utáni izomlázra, gyorsabb regenerációra.
A vörös fény csökkenti az izomfeszültséget és
a mikrosérülések gyógyulási idejét.

02

Wellness-tudatos felhasználók

Bőrifiataltás, ránccsökkentés, bőrtömörség visszaállítása.
Napi 15–20 perces kezelés szemmel látható mértékben képes
fiatalítani a bőrt már néhány héten belül.

03

Krónikus fájdalomban szenvedők

Ízületi fájdalmak, hátproblémák, myofascialis szindróma,
a közeli infravörös fény a szövetek mélyén hat,
a hagyományos masszázssal összemérhető hatékonysággal.

04

Wellness, hotel, fizioterápia

Szállodák wellness részlege, prémium fitnessközpontok,
fizioterapeuták. Exkluzív prémium kezelési lehetőség a vendégek
számára, hiszen egy hatékony kezelési mód.

05

Otthoni pilates rajongók

Csúszás és vezetékmentes kialakítás, ráadásul könnyű tárolás.
Aktív gyakorlatok aktív regeneráció,
bármiféle extra időbefektetés nélkül.

!

FIGYELMEZTETÉS

Terhesség, epilepszia, fotoérzékenységet okozó gyógyszerek
(pl. egyes antibiotikumok, tetraciklinek) szedése esetén
konzultálj kezelőorvosoddal használat előtt.
A készülék nem helyettesíti az orvosi kezelést.

Mire jó a Facialight?

Több száz klinikai tanulmány igazolja a vörösfényterápia hatékonyságát. Az alábbiakban a legfontosabb bizonyított hatásokat foglaltuk össze.

01 • BŐR

Kollagén & bőrmegújulás

A 660 nm-es vörös fény aktivizálja a fibroblasztokat, növeli a kollagén és elasztin termelést.

Eredmény: feszesebb, simább és egészségesebb bőr.

02 • IZOM

Izomlazítás & regeneráció

A 850 nm-es közeli infravörös fény csökkenti az izomfeszültséget és a mikrosérüléseket. Sportolóknak ideális edzés után.

03 • KERINGÉS

Keringésjavítás

Fokozza a kapilláris vérkeringést, javítja a szöveti oxigénellátást. Segíti a sejtszintű regenerációt az egész testfelületen.

04 • FÁJDALOM

Fájdalomcsillapítás

Klinikailag igazolt gyulladáscsökkentő hatás. Ízületi és krónikus fájdalmak esetén is kiemelten hatékony.

05 • GYÓGYULÁS

Sebgyógyulás

A sejtregeneráció érdemi felgyorsítása.

Kisebb sérülések, műtét utáni rehabilitáció támogatása.

06 • ALVÁS

Stresszcsökkentés & alvás

A rendszeres kezelés javítja a melatonin-egyensúlyt és a mélyalvás minőségét.

Természetesen elalvás előtti használat esetén.

Mikor látszanak az eredmények?

1. KEZELÉS UTÁN

Pihentebb bőr, könnyebb izmok, azonnali relaxáció.

2-4 HÉT UTÁN

Láthatóan feszesebb bőr, izomfájdalom csökkenése.

6-12 HÉT UTÁN

Mérhető kollagénnövekedés, tartós fájdalom enyhülés.

Hogyan használd?

A Facialight matrac rendkívül egyszerűen használható. Kövesd az alábbi lépéseket az optimális eredményért.



1

Helyezd el a matracot

Terítsd ki egy egyenes, stabil felületre. Padlóra, masszázsságyra, szőnyegre. A csúszásgátló réteg szinte bárhol stabil marad, még a legaktívabb gyakorlatok közben is.

2

Kapcsold be

Nyomd meg a bekapcsológombot. A LED-ek azonnal bekapcsolnak és a teljes időtartam alatt egyenletesen világítanak.

3

Feküdj vagy ülj rá

Helyezkedj el a matracon a kezelni kívánt testrészsel lefelé (hát, lábak, vállak). Vékony ruhán keresztül is működik, viszont közvetlenebb bőr-érintkezés esetén mérhetően hatékonyabb.

4

Kezelési idő

Javasolt időtartam: **20–30 perc**. Ne haladja meg a **70 percet**. Kezelés közben relaxálj, nyújts, hallgass zenét vagy végezz aktív gyakorlatokat.

5

Kezelés befejezése

Kapcsold ki a készüléket. Fogyassz elegendő vizet a kezelés után, hiszen a fokozott sejttanyagcsere igényli a megfelelő hidratációt.

AJÁNLOTT HASZNÁLAT

Kezdőknek	Heti 3–4 alkalom, 15–20 perc
Sportolóknak	Napi 1 alkalom, 15–20 perc
Célzott kezelés	Naponta 2× is lehetséges, max. 30 perc / alkalom



TIPP

A legjobb eredmény érdekében végezz statikus nyújtást a Matracon™ kezelés közben.

Tárolás és tisztítás

TÁROLÁS

Kezelés után tedd vissza a mellékelt tárolózsákba, vagy akaszd fel a falra és használd akár infra panelként is.

Hűvös, száraz, közvetlen naptól védett helyen tárold.

Hőmérséklet	5°C – 40°C között
Páratartalom	Száraz környezet, NE tárold fürdőszobában
Hajlítás	Bármilyen irányban, tetszőlegesen
Gyerekek elől	Lehetőleg tartsd elzárva

TISZTÍTÁS

A matrac felületét puha, enyhén megnedvesített törölkendővel töröld át kezelés után. Ne merítsd vízbe! Vegyszeres tisztítószert, alkoholt, fertőtlenítőt ne használj, mert ezek károsítják a burkolatot.

✓ Enyhén nedves törölkendő	✗ Vízbe merítés
✓ Száraz áttörítés	✗ Alkohol, aceton
✓ Enyhe szappanos törölkendő	✗ Erős vegyszerek
✓ Kezelés után minden alkalommal	✗ Mosógép, centrifuga



Műszaki adatok

Pontos paraméterek, anyagminőség, garancia és gyártási információk.

LED HULLÁMHOSSZ

660 nm + 850 nm

ENERGIAELLÁTÁS

Akkumulátoros,
USB-C

MATRAC MÉRET

200 × 64 × 0,6 cm

TÖMEG

Könnyű, hordozható

BURKOLAT

Orvosi TPE

FELÜLET

Csúszásgátló réteg

VÍZÁLLÓSÁG

Kívül védett,
belül NEM

TÁROLÓZSÁK


Mellékelve

GARANCIA

36 hónap

GYÁRTÓ

Facialight HU

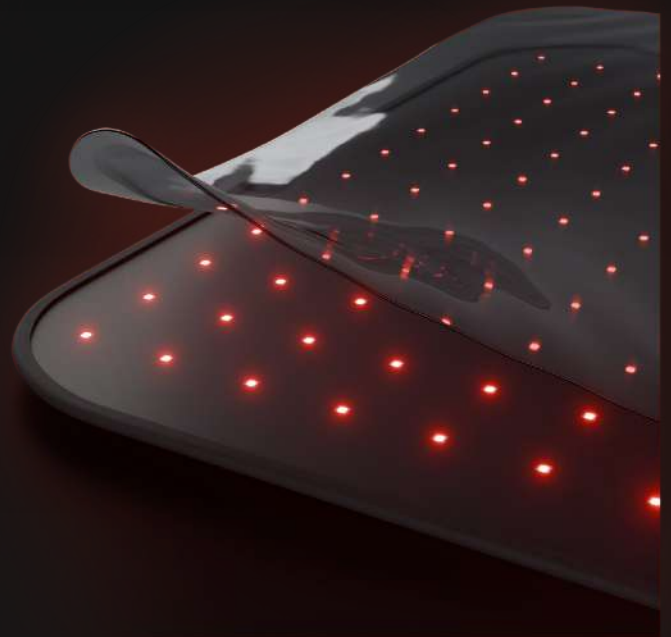

FONTOS MEGJEGYZÉS

A Facialight Matrac™ nem orvosi eszköz és nem helyettesíti az orvosi diagnózist vagy kezelést. Az itt leírt hatások tudományos irodalmon alapulnak, az egyéni eredmények eltérhetnek. Egészségügyi problémák esetén konzultálj szakorvossal.

FACIALIGHT

VÖRÖS FÉNYTERÁPIA – BÁRHOL, BÁRMIKOR

Kérdésed van?

www.facialight.hu

WEBOLDAL

www.facialight.hu

EMAIL

info@facialight.hu

„Az első aktív vörösfényterápiás matrac Magyarországon.”

